

Cubresilla de ruedas

TNT LITE



1.- Referencia sanitaria: SSL102BB

2.- Finalidad de uso prevista: Sábana cubresilla de ruedas, de un solo uso, destinada a recubrir la superficie de contacto de ésta, con el fin de actuar como barrera física que limite la transferencia de agentes infecciosos y contribuya a reducir el riesgo de contaminación cruzada, contribuyendo a proteger al paciente en entornos clínicos y hospitalarios.



- Gama TNT LITE, ligereza y protección
- Hipoalergénica y libre de látex
- Repelente a fluidos
- Suave, confortable y fácil de colocar
- Reciclable

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático	20 g/m ²	

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- No hay otros componentes



Cubresilla de ruedas

TNT LITE



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++

5.2.-Dimensiones

Código	Talla	*Dimensiones	Guía Eco
10	U (Única)	60 cm ancho x 116 cm largo	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar: Sin cintas	ECO++
11	Con cintas	ECO

5.4.-Empaquetado

Código	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	Polybag 600 uds.	600 uds.	12.000 uds. 225 cm altura total	ECO++

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Mercado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable




Cubresilla de ruedas

TNT LITE



7.- Modelo de etiquetado

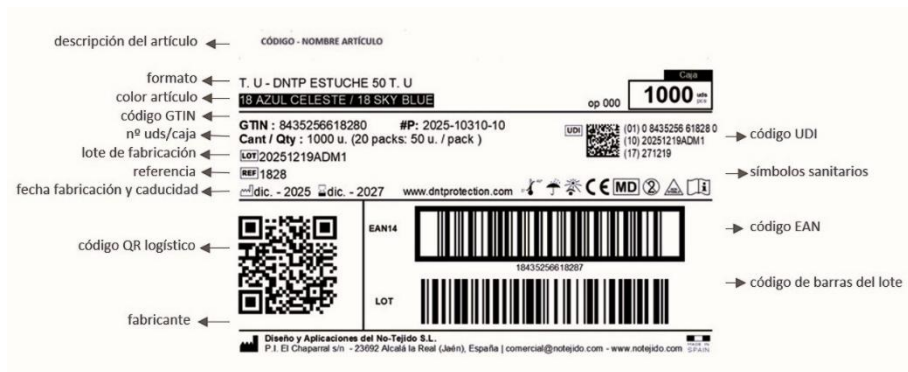

8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Pasar cada puño de la silla a través de las aberturas en forma de cruz comprobando que quedan libres para el manejo y no comprometan la movilidad, y desplegar el cubresilla sobre el asiento y respaldo, alineando las marcas laterales con la estructura de la silla.
- 2.-En caso de modelo con cintas laterales, anudarlas en la parte posterior comprobando que no haya obstrucción de las partes móviles o los frenos.
- 3.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

