

Sábana transferencia

COVER DRY+



1.- Referencia sanitaria: QSB601AA

2.- Finalidad de uso prevista: Sábana de traslado de uso quirúrgico, no estéril, de un solo uso, con propiedades impermeables, destinada a cubrir superficies de examen o tratamiento temporales, que facilita la transferencia del paciente a otra superficie. Actúa como barrera física que limita la transmisión de agentes infecciosos y contaminantes, contribuyendo a reducir el riesgo de contaminación cruzada en entorno quirúrgico.



- Gama COVER DRY+, protección impermeable extra
- Repelente a fluidos
- Reciclable ECO

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno alta suavidad y antiestático + coating	45 g/m ² + 20 g/m ²	ECO

*Tolerancia ± 5%

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- No hay otros componentes

Sábana transferencia

COVER DRY+



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
AC	Azul celeste	ECO

5.2.-Dimensiones

Código	*Ancho extendido de sábana	*Largo extendido de sábana	Guía Eco
10	100 cm	200 cm	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Dimensiones	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	100 x 200 cm	Polybag 50 uds.	50 uds.	800 uds. 203 cm altura total	ECO++

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad

- Marcado CE. Producto Sanitario Clase I, no estéril, de acuerdo a Reg. (UE) 2017/745
- Fabricado en España bajo Licencia AEMPS nº 7677-PS. Conforme a RD 1591/2009 y RD 192/2023.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, ISO 13485:2018, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.
- Reciclable




Sábana transferencia

COVER DRY+



7.- Modelo de etiquetado

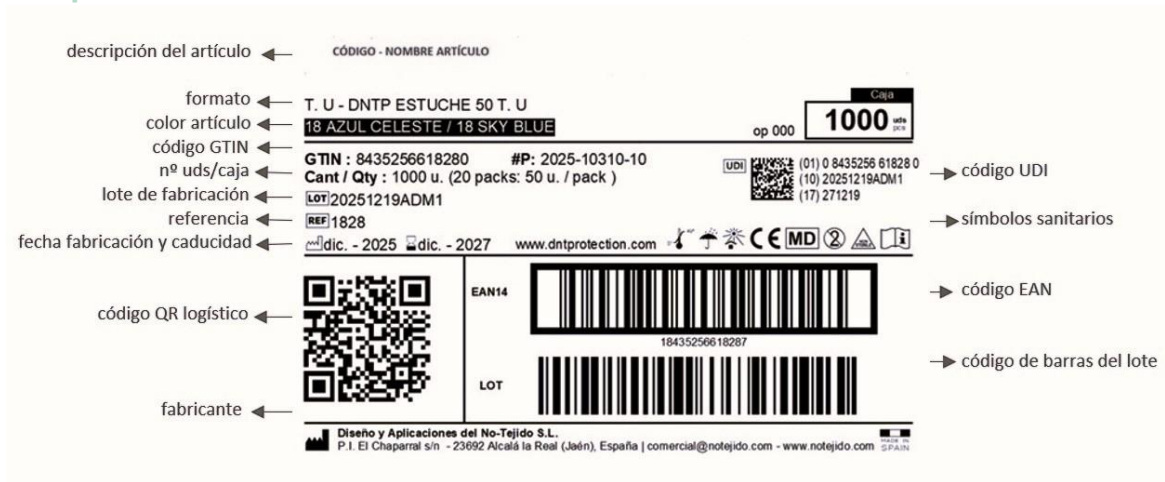

8.- Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Desdoblar la sábana y extenderla sobre la superficie deseada. Colocar la cara impermeable en contacto con la superficie, que es la que presenta el sobrante del refuerzo lateral. La cara en contacto con la piel es la de tejido-no-tejido con el refuerzo lateral liso.
- 2.-Colocar al paciente encima de ésta y sujetar la sábana por las esquinas y los bordes reforzados
- 3.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Este producto deberá ser desechado al contenedor de residuos sanitarios correspondiente
- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com
- Producto Sanitario Clase I no estéril

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.

